


おむつ
ナビ

おむつナビ用 送信機・受信機

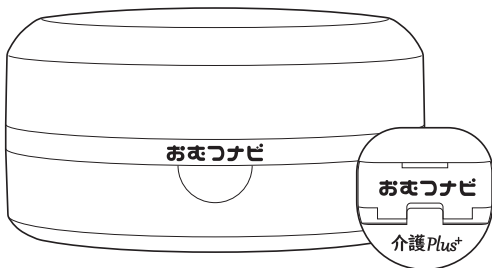

セット内容

- ・送信機
- ・受信機
- ・電源ケーブル
- ・専用ピック

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取り扱い説明書はおむつナビ尿とりパッド用の送信機および受信機の使用方や安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。

本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。

また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

使用上のご注意

表示の説明



警告

「火災や感電などにより死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「けがをしたり、周囲の物品に損害が発生する可能性がある内容」を示します。

表示の説明



中の絵と文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵と文で、しなければならないこと（指示）を示します。



警告



車の運転中には使用しない

運転中に各種のアラームが鳴った場合は、安全な場所に車を停止してから確認してください。



分解しない

送信機の電池交換以外は、自分で分解や修理をしないでください。
感電や火災、やけどなどの原因になります。



航空機の中など高度な安全が要求される場所では使用しない

計器類や計測機器などの誤作動の原因になります。



放射線や磁気による検査や治療を受ける場合は、必ず送信機を取り外す

故障や思わぬ事故の原因になります。



万が一、異常が発生したときは使用を中止する

本製品から異臭や煙が出た場合は、すぐに使用を中止し、送信機から電池を取り外し、受信機の電源ケーブルを外してください。

その後は使用せず、販売店が当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。

注意



浴室やプールなど水気の多い場所で使用および保管はしない
感電の恐れや、湿度の影響で品質が劣化する場合があります。



購入された国以外では使用しない

各国の電波法関連の認証は製品を販売している国に適合した認証を受けています。
製品には販売される各国の電波法に定められた表示のみをしています。他国で使用した場合は罰せられる可能性があります。



高温多湿を避けて涼しいところに保管する
保管する環境によって品質が劣化する場合があります。



電波の干渉が少ない場所で使用する

本製品は無線通信機器です。周囲に他の無線通信機器がある場合は電波干渉によって正しく動作しない場合があります。できるだけ他の無線通信機器がない場所でご使用ください。




小さなお子様の手の届かないところに保管する
付属品の誤飲など思わぬ事故をまねく恐れがあります。




本製品を廃棄する場合は各地方自治体の条例やルールに従う
本製品にはリチウムボタン電池およびリチウムイオン電池が使われています。

各部の名称と働き

送信機

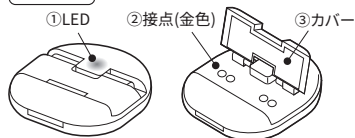



電源ケーブル

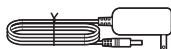

専用ピック



受信機

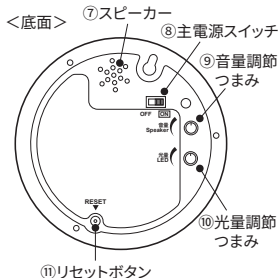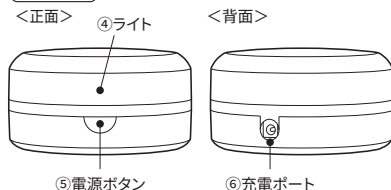

おむつナビ尿とりパッド (別売)




①LED	受信機との接続時、電池交換後、専用パッドから取り外した際に点灯・点滅します。
②接点(金色)	パッドの検知ラインと送信機を接続する部分です。
③カバー	パッドの検知ラインを挟んで固定します。
④ライト	ペアリング時やパッドの状態をお知らせします。
⑤電源ボタン	電源をON・OFFしたり、ペアリングする際に使用します。
⑥電源ポート	電源ケーブルを接続します。
⑦スピーカー	アラーム音が鳴ります。
⑧主電源スイッチ	使い始める際にONにしたら、その後は常時ONにします。
⑨音量調節つまみ	アラーム音の音量を調節します。
⑩光量調節つまみ	ライトの明るさを調節します。
⑪リセットボタン	受信機が上手く機能しなくなった際、つまようじなどで押し、リセットします。リセット後は必ずペアリングを行ってください。
⑫検知ライン	排尿量を検知するためのセンサーです。


ご利用にあたっての準備

受信機


- ① 受信機の電源ポートに付属の電源ケーブルを接続します。

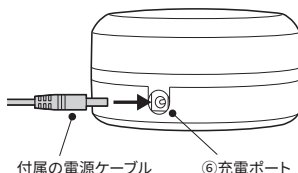

- ② 電源ケーブルの反対側をコンセントに接続します。
※自宅での利用時は、電源ケーブルを刺したまま使用することを推奨していますが、内臓バッテリーの充電状況により、電源ケーブルを外した状態でも短時間の使用ができます。
充電時間：約2時間
使用時間：約8時間
(使用方法によって異なる場合があります)

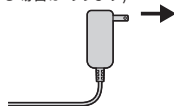

- ③ 電源ボタンを長押し(約1秒間)します。
ライトの白色点灯と同時に音が鳴り、電源がONになります。

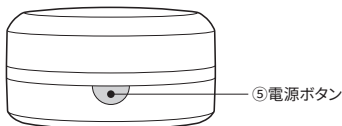



送信機

電源のON・OFF

おもつナビ尿とりパッド(別売)に正しく取り付けると、自動で電源がONになります。
おもつナビ尿とりパッド(別売)から取り外すと自動で電源がOFFになります。
※おもつナビ尿とりパッド(別売)への取り付け方法は6ページ目をご参照ください。


電池の交換方法

- ① 専用ピックで送信機のカバーを外し、古い電池を取り外します。
- ② 下図の端子をつぶさないように、市販の電池(CR2016)を端子の下にはめ込みます。
- ③ 電池が正しく取り付けられたのを確認し、カバーをはめ直します。

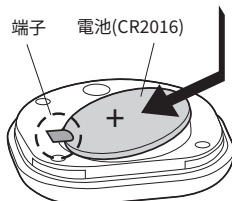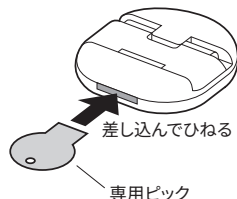


送信機のおむつナビ尿とり패드への取付方法

- ① おむつナビ尿とり패드前側の検知ラインと送信機のカバー内部にある金色の接点が重なるように位置を合わせ、カバーを閉めます。

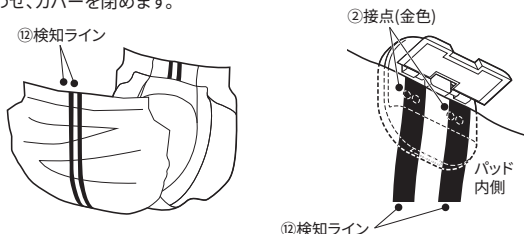


- ② 送信機のLEDが緑色に点灯することを確認します。

※LEDが点灯しない場合は、位置がずれているか、電池がなくなっている可能性があります。

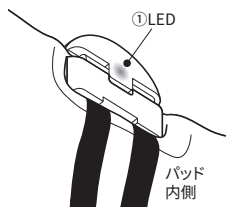

- ③ パッドの端を外側へ折り返し、送信機裏面のマジックテープでおむつナビ尿とり패드に貼り付けます。

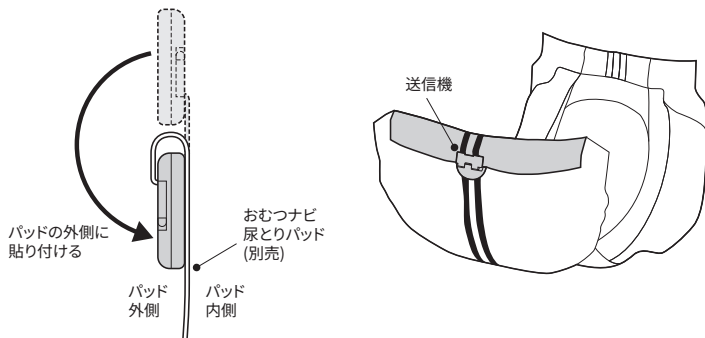

アプリのインストール方法

※おむつナビをご利用いただくには、システム「介護プラス」のアプリをインストールする必要があります。

Android の場合

下記のQRコードを読み込む、もしくは「Playストア」を開き、検索バーに「介護プラス」と入力します。
検索結果から右記のアプリを選択し、インストールします。



※Android バージョン7.0以降に対応

iOS の場合

下記のQRコードを読み込む、もしくは「App Store」を開き、検索バーに「介護プラス」と入力します。
検索結果から右記のアプリを選択し、インストールします。



※iOS バージョン12.0以降に対応

お手入れ方法

送信機

- ・送信機は防水仕様です。汚れた場合は水またはぬるま湯で洗って下さい。
- ・消毒液を使用する場合は、浸漬せず注意して使用し、最後に水で洗い流してから使用して下さい。

受信機

- ・受信機は防水仕様ではありません。汚れた場合は、布などを水で濡らし、固く絞ったもので拭いて下さい。

主な仕様

	送信機	受信機
製品型番	SWL-011	JO1-RE20A22
通信方式	Bluetooth Version 5.0 (BLE : Bluetooth Low Energy)	Bluetooth Version 5.0 (BLE : Bluetooth Low Energy) Wi-fi 2.4GHz帯
最大接続距離	見通し約15m	
使用周波数帯	2.4GHz 帯	
最大登録可能台数	—	1台
使用電池	ボタン電池(CR2016型)	専用リチウムイオンバッテリー
動作温度	10～40℃	
保管温度	0～50℃	
外径寸法	W30 × D33 × H8mm	直径110 × H60mm
重量(電池含む)	約10g	約200g
防水仕様	IPX6相当	非防水
保証期間	お買い上げより1年	
原産国	日本	



201-180351
217-204070



2AC7Z-ESP32WROOM32E



MSIP-CRM-sWA-SWL-009
R-C-es5-ESP32WROOM32E



CCAJ17LP9280T8
CCAK21Y10020T0



保証規定

1. 保証期間

販売店発行のレシートに記載されている購入日より1年間、本製品を保証規定に従い無償修理することを保証いたします。

2. 保証対象

保証対象は本製品の送信機及び受信機のみとさせていただきます、その他の添付物は保証の対象となりません。

3. 保証内容

本製品添付のマニュアルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。

4. 適用の除外

保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。

- ・故障した本製品をご提出いただけない場合。
- ・ご購入日が確認できる証明書(レシートや納品書など)をご提示いただけない場合。
- ・レシートまたは保証シールの所定事項(製品名、シリアルナンバー、その他)の未記入、あるいは改変がおこなわれている場合。
- ・お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないため生じた故障、損傷の場合。
- ・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- ・弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- ・本製品添付のマニュアルに記載の使用方法、および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- ・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- ・本製品添付のマニュアルに記載の動作/保管温度を超える環境により故障した場合。
- ・その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5. 免責

本製品に関して弊社が追う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

6. その他

- ・レシートまたは保証シールの再発行はいたしません。
- ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- ・製品修理にかかる付与費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。またご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- ・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。

7. 有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。



保証書



製品名 ☐ 送信機 ☐ 受信機	保証期間 ご購入日から1年間
---	-------------------

○お客様ご記入欄

フリガナ
お名前
ご住所 〒
() -

※お客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。○印の欄は、お客様にご記入いただくものです。

○印の欄は、販売店でご記入いただくものとなります。

記入がない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。



(販売元) 株式会社 光洋

ホームページ <https://koyo.jp/>

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー4階

製品に関するお問い合わせ



(製造元) 三和株式会社

ホームページ <https://sanwajp-group.com/>

〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館808

お問い合わせはこちら

